

GÉZATONE



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ


КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АППАРАТНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ ФРАНЦУЗСКОГО БРЕНДА GEZATONE ПРЕДСТАВЛЕНО ШИРОКИМ СПЕКТРОМ МОДЕЛЕЙ, ОТ ПРОСТЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ ВОСКА И ПАРАФИНА ДО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМБАЙНОВ.

ПРОДУКЦИЯ GEZATONE ПОЛЬЗУЕТСЯ СПРОСОМ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВО МНОГИХ СТРАНАХ МИРА БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОМУ КАЧЕСТВУ, ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ, ПРОСТОТЕ ПРИМЕНЕНИЯ И ВИДИМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ.



**ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПОДТВЕРЖДЕНА
РОСЗДРАВНАДЗОРОМ**

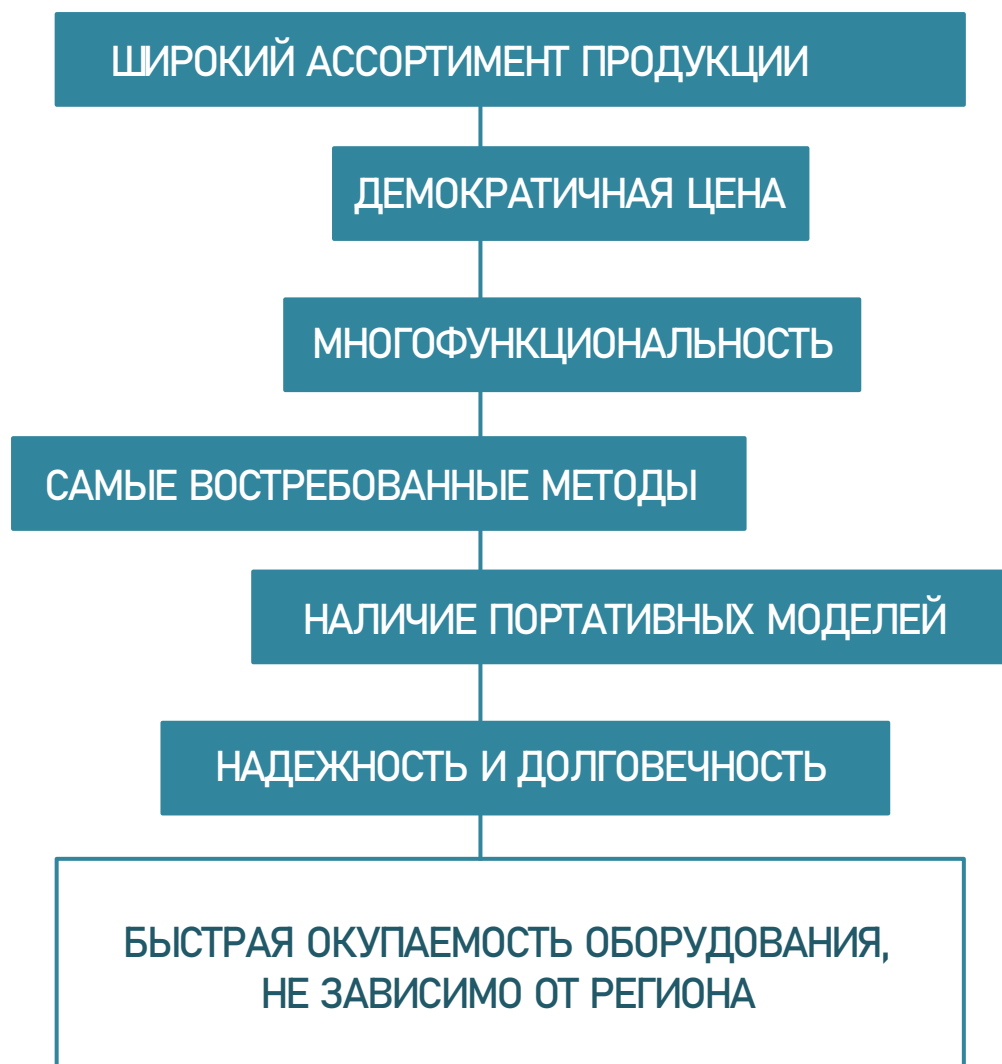

ВЫБОР ПРОФИЛЬНОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ВАЖНЫХ МОМЕНТОВ В ОСНАЩЕНИИ САЛОНА КРАСОТЫ, ПОЭТОМУ К ПОДБОРУ МОДЕЛЕЙ СЛЕДУЕТ ОТНЕСТИСЬ ОСОБЕННО ВНИМАТЕЛЬНО.

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РОСЗДРАВНАДЗОРА – ПРИЗНАК СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И ЗАЛОГ КАЧЕСТВЕННОЙ, ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА, БЕЗОПАСНОСТЬ И ДОВЕРИЕ КЛИЕНТА.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ В-790


для лица и тела

АППАРАТ СОЧЕТАЕТ ФУНКЦИИ ОСНОВНЫХ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОЦЕДУР.

ТРИ УРОВНЯ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ, ГЕНЕРАЦИЯ УЛЬТРАЗВУКА В НЕПРЕРЫВНОМ И ИМПУЛЬСНОМ РЕЖИМЕ, ТРИ МАНИПУЛЫ, 2 ТАЙМЕРА.



1303127M

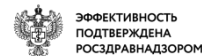

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



УЗ ПИЛИНГ:
25 кГц



УЗ ФОНОФРЕЗ И МИКРОМАССАЖ
МАНИПУЛА ДЛЯ ПРОЦЕДУР ПО ЛИЦУ 2 МГц
МАНИПУЛА ДЛЯ ПРОЦЕДУР ПО ТЕЛУ 1 МГц

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота ультразвука низкочастотной лопатки:
25 кГц,
Частота ультразвука высокочастотных манипул:
1 МГц (тело, лицо)
2 МГц (лицо)

Напряжение питания: АС 220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: не более 30 Вт
Размеры электронного блока: 350 x 280 x 130 мм
Размеры упаковки: 430 x 410 x 180 мм
Вес в упаковке: 6.5 кг

АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА

ГЕЛЬ «УЛЬТРАКЛИН
КОНТРОЛЬ»



4501421APROR – 630 мл
4501422AR – 250 мл

ГЕЛЬ «УЛЬТРАКЛИН
СЕНС»



4501423APROR – 630 мл
4501424AR – 250 мл

ГЕЛЬ
«УЛЬТРАЛИФТ»



4501411APROR – 630 мл
4501416AR – 250 мл

АКВА-ГЕЛЬ
АЛОЭ-ВЕРА



4501412APROR – 630 мл
4501417AR – 250 мл

КИСЛОРОДНЫЙ ГЕЛЬ
С ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ



4501413APROR – 630 мл
4501418AR – 250 мл

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ

BIO SONIC 3003

КОМПАКТНЫЙ И СТИЛЬНЫЙ ПРИБОР С ЭЛЕКТРОННЫМ ДИСПЛЕЕМ И УДОБНОЙ МАНИПУЛОЙ ЛЕГКО РАЗМЕЩАЕТСЯ В КАБИНЕТЕ ЛЮБОЙ ПЛОЩАДИ. 3 РЕЖИМА И 3 УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ДЛЯ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ КОЖИ. ВСТРОЕННЫЙ ТАЙМЕР И СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОБЛЕГЧАЮТ РАБОТУ СПЕЦИАЛИСТА.

1303105M



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



УЗ ПИЛИНГ
УЗ ФОНОФРЕЗ И МИКРОМАССАЖ
25 кГц

РЕЖИМЫ ГЕНЕРАЦИИ УЛЬТРАЗВУКА:
НЕПРЕРЫВНЫЙ И ИМПУЛЬСНЫЙ.
НАСАДКИ: УЛЬТРАЗВУКОВАЯ МАНИМУЛА,
ЭЛЕКТРОД-БРАСЛЕТ.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ И РУЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИНТЕНСИВНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота ультразвука : **25 кГц**,
Выходная мощность: не более 1 Вт/см2
Напряжение питания: DC 24 В, 600 мА
Потребляемая мощность: не более 17 Вт

Диапазон рабочих температур: +10...35°C
Допустимая влажность: не более 85%
Размеры: 240 x 230 x 95 мм
Вес: 1.5 кг

АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА

ГЕЛЬ «УЛЬТРАКЛИН
КОНТРОЛЬ»



4501421APROR – 630 мл
4501422AR – 250 мл

ГЕЛЬ «УЛЬТРАКЛИН
СЕНС»



4501423APROR – 630 мл
4501424AR – 250 мл

ГЕЛЬ
«УЛЬТРАЛИФТ»



4501411APROR – 630 мл
4501416AR – 250 мл

АКВА-ГЕЛЬ
АЛОЭ-ВЕРА



4501412APROR – 630 мл
4501417AR – 250 мл

КИСЛОРОДНЫЙ ГЕЛЬ
С ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ



4501413APROR – 630 мл
4501418AR – 250 мл

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ

BIO SONIC 3008

АППАРАТ С ВЫСОКОЙ МОЩНОСТЬЮ, КОТОРЫЙ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО РАБОЧЕГО ДНЯ БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ.

3 РЕЖИМА И 3 УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ДЛЯ РАБОТЫ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ КОЖИ.

ВСТРОЕННЫЙ ТАЙМЕР И СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОБЛЕГЧАЮТ РАБОТУ СПЕЦИАЛИСТА.



1303116



ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПОДТВЕРЖДЕНА
РОСЗДРАВНАДЗОРОМ



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



УЗ ПИЛИНГ
УЗ ФОНОФРЕЗ И МИКРОМАССАЖ
27 кГц

2 РЕЖИМА ГЕНЕРАЦИИ УЛЬТРАЗВУКА:
НЕПРЕРЫВНЫЙ И ИМПУЛЬСНЫЙ.
НАСАДКА: УЛЬТРАЗВУКОВАЯ МАНИМУЛА С КНОПКОЙ
ГЕНЕРАЦИИ УЛЬТРАЗВУКА.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ И РУЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИНТЕНСИВНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота ультразвука : **27 кГц**,
Выходная мощность: не более 1 Вт/см²
Напряжение питания: AC 220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: не более 30 Вт

Диапазон рабочих температур: +10...35°C
Допустимая влажность: не более 85%
Размеры: 300 x 320 x 160 мм
Вес: 4,6 кг

АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА

ГЕЛЬ «УЛЬТРАКЛИН
КОНТРОЛЬ»



4501421APROR – 630 мл
4501422AR – 250 мл

ГЕЛЬ «УЛЬТРАКЛИН
СЕНС»



4501423APROR – 630 мл
4501424AR – 250 мл

ГЕЛЬ
«УЛЬТРАЛИФТ»



4501411APROR – 630 мл
4501416AR – 250 мл

АКВА-ГЕЛЬ
АЛОЭ-ВЕРА



4501412APROR – 630 мл
4501417AR – 250 мл

КИСЛОРОДНЫЙ ГЕЛЬ
С ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ



4501413APROR – 630 мл
4501418AR – 250 мл

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ BIO SONIC HS2307i

ПОРТАТИВНЫЙ КОМПАКТНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КОМПЛЕКСНЫЙ АППАРАТНЫЙ УХОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРАЗВУКА.

АППАРАТ ПРЕДСТАВЛЕН В ВИДЕ УЗ МАНИПУЛЫ, ОСНАЩЕННОЙ ЭЛЕКТРОННЫМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ И УКОМПЛЕКТОВАН СЕТЕВЫМ АДАПТОРОМ.

ЛЕГКО ДЕРЖАТЬ В РУКЕ, ЛЕГКО РАБОТАТЬ
УДОБЕН ДЛЯ ЧАСТНЫХ МАСТЕРОВ.



1302056M



ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПОДТВЕРЖДЕНА
РОССТАНДАРТОМ



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



УЗ ПИЛИНГ
УЗ ФОНОФРЕЗ И МИКРОМАССАЖ
25 кГц

2 УРОВНЯ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ

2 РЕЖИМА: НЕПРЕРЫВНЫЙ И ИМПУЛЬСНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота ультразвука: **25 кГц**
Выходная мощность: не более 2 Вт/см²
Напряжение питания: DC 12 В, 500 мА
Потребляемая мощность: не более 6 Вт

Диапазон рабочих температур: +10...35°C
Допустимая влажность: не более 85%
Размеры (в упаковке): 171 x 255 x 60 мм
Вес: 300 г (с сетевым адаптером и упаковкой)

АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА

ГЕЛЬ «УЛЬТРАКЛИН
КОНТРОЛЬ»



4501421APROR – 630 мл
4501422AR – 250 мл

ГЕЛЬ «УЛЬТРАКЛИН
СЕНС»



4501423APROR – 630 мл
4501424AR – 250 мл

ГЕЛЬ
«УЛЬТРАЛИФТ»



4501411APROR – 630 мл
4501416AR – 250 мл

АКВА-ГЕЛЬ
АЛОЭ-ВЕРА



4501412APROR – 630 мл
4501417AR – 250 мл

КИСЛОРОДНЫЙ ГЕЛЬ
С ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ



4501413APROR – 630 мл
4501418AR – 250 мл

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ BIO SONIC 770S

ПОРТАТИВНЫЙ КОМПАКТНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КОМПЛЕКСНЫЙ АППАРАТНЫЙ УХОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРАЗВУКА.

АППАРАТ ПРЕДСТАВЛЕН В ВИДЕ УЗ МАНИПУЛЫ С АККУМУЛЯТОРОМ
ЛЕГКО ДЕРЖАТЬ В РУКЕ, ЛЕГКО РАБОТАТЬ
УДОБЕН ДЛЯ ЧАСТНЫХ МАСТЕРОВ.

1301231



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



УЗ ПИЛИНГ
УЗ ФОНОФРЕЗ И МИКРОМАССАЖ
25 кГц
МИКРОТОКИ

3 РЕЖИМА:
CLEANSING / УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПИЛИНГ
MOISTURIZING / УВЛАЖНЕНИЕ
LIFTING / ЛИФТИНГ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота ультразвука **24 кГц**
Мощность на выходе не более 0.8 Вт/см2
Источник питания аккумулятор 3.7 В / 600 мАч
Устройство для зарядки DC 5. В, не менее 600 мА
(в комплект не входит), разъем USB тип A

Размеры 207мм x 96мм x 47мм
Вес (вместе с устройством для зарядки и упаковкой) 0,3 кг

АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА

ГЕЛЬ «УЛЬТРАКЛИН
КОНТРОЛЬ»



4501421APROR – 630 мл
4501422AR – 250 мл

ГЕЛЬ «УЛЬТРАКЛИН
СЕНС»



4501423APROR – 630 мл
4501424AR – 250 мл

ГЕЛЬ
«УЛЬТРАЛИФТ»



4501411APROR – 630 мл
4501416AR – 250 мл

АКВА-ГЕЛЬ
АЛОЭ-ВЕРА



4501412APROR – 630 мл
4501417AR – 250 мл

КИСЛОРОДНЫЙ ГЕЛЬ
С ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ



4501413APROR – 630 мл
4501418AR – 250 мл

АППАРАТ МИКРОТОКОВОЙ ТЕРАПИИ

BIOLIFT 608 Miracle Bio Wave

ПОРТАТИВНЫЙ АППАРАТ МИКРОТОКОВОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ОСНАЩЕН ВСТРОЕННЫМ МИКРОПРОЦЕССОРОМ, В КОМПЛЕКТЕ МАКСИМАЛЬНЫЙ НАБОР ЭЛЕКТРОДОВ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ (ОДИНАРНЫЕ, СДВОЕННЫЕ, АДГЕЗИВНЫЕ ПЛАСТИНЫ, ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЕ ПЕРЧАТКИ). ИМЕЕТ ФУНКЦИЮ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ ПОЛЯРНОСТЕЙ.



1303110M



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ
ЛИЦО, ТЕЛО, ПЕРИОРБИТАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛИЦА: ЛИФТИНГ, ЛИМФОДРЕНАЖ, ДЕПИГМЕНТАЦИЯ, УВЛАЖНЕНИЕ, КОРРЕКЦИЯ САЛОУДЕЛЕНИЯ, ОМОЛОЖЕНИЕ

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБЛАСТИ ГЛАЗ: ЛИФТИНГ, КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН, ОТЕКОВ, "МЕШКОВ" И ТЕМНЫХ КРУГОВ ПОД ГЛАЗАМИ

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ТЕЛА: ЛИФТИНГ, ЛИМФОДРЕНАЖ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: DC 18В, 500мА

Форма выходного сигнала: биполярные импульсы с гармонической модуляцией

Частота следования импульсов: 0,5-2 Гц

Частота модуляции: 100 Гц / 8кГц

Максимальный выходной ток: 5 мА

Максимальное выходное напряжение: 14 В

Размеры аппарата: 280 x 190 x 40 мм

Размеры упаковки: 325 x 315 x 80 мм

Вес: 3 кг

АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА

КИСЛОРОДНЫЙ ГЕЛЬ
С ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ



4501413APROR – 630 мл
4501418AR – 250 мл

ГЕЛЬ С ИКРОЙ И
КОЛЛАГЕНОМ



4501425APROR – 630 мл
4501426AR – 250 мл

ГЕЛЬ
«УЛЬТРАЛИФТ»



4501411APROR – 630 мл
4501416AR – 250 мл

АКВА-ГЕЛЬ
АЛОЭ-ВЕРА



4501412APROR – 630 мл
4501417AR – 250 мл

ГЕЛЬ «БОДИ ЛИФТ
АКТИВ»



4501429APROR – 630 мл
4501430AR – 250 мл

АППАРАТ МИКРОТОКОВОЙ ТЕРАПИИ

BIOLIFT8806

АППАРАТ МИКРОТОКОВОЙ ТЕРАПИИ
ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА И ТЕЛА
СНАБЖЕН КОМПЛЕКТОМ СДВОЕННЫХ
ЭЛЕКТРОДОВ И
ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИМИ
ПЕРЧАТКАМИ.
УДОБНАЯ СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ С ТАЙМЕРОМ.
СОВРЕМЕННЫЙ, ПРАКТИЧНЫЙ ДИЗАЙН
И ПРОСТОТА В ЭКСПЛУАТАЦИИ.



1303113M

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПОДТВЕРЖДЕНА
РОСЗДРАВНАДЗОРОМ



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ
ЛИЦО, ТЕЛО, ПЕРИОРБИТАЛЬНАЯ
ОБЛАСТЬ

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛИЦА: ЛИФТИНГ, ЛИМФОДРЕНАЖ,
ДЕПИГМЕНТАЦИЯ, УВЛАЖНЕНИЕ, КОРРЕКЦИЯ
САЛОУДЕЛЕНИЯ, ОМОЛОЖЕНИЕ

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБЛАСТИ ГЛАЗ: ЛИФТИНГ, КОРРЕКЦИЯ
МОРЩИН, ОТЕКОВ, "МЕШКОВ" И ТЕМНЫХ КРУГОВ ПОД
ГЛАЗАМИ

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ТЕЛА: ЛИФТИНГ, ЛИМФОДРЕНАЖ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания 230V/50Hz
Потребляемая мощность: 20 Вт
Форма импульса: меандр (длина импульса
равна длине паузы).
Период импульса: 150 мс

Макс. выходное напряжение: 25 В
Максимальный ток:
Режим «FACE – 1» 0,3 мА, Режим «FACE – 2» 0,6
мА, Режим «BODY» 0,8 мА
Амплитуда импульсов: 10, 15, 20 В

АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА

КИСЛОРОДНЫЙ ГЕЛЬ
С ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ



4501413APROR – 630 мл
4501418AR – 250 мл

ГЕЛЬ С ИКРОЙ И
КОЛЛАГЕНОМ



4501425APROR – 630 мл
4501426AR – 250 мл

ГЕЛЬ
«УЛЬТРАЛИФТ»



4501411APROR – 630 мл
4501416AR – 250 мл

АКВА-ГЕЛЬ
АЛОЭ-ВЕРА



4501412APROR – 630 мл
4501417AR – 250 мл

ГЕЛЬ «БОДИ ЛИФТ
АКТИВ»



4501429APROR – 630 мл
4501430AR – 250 мл

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ: МИКРОТОКИ, ГАЛЬВАНИКА, ТЕПЛО-ХОЛОД

BIOLIFT 840

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ МИНИ КОМБАЙН ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ПРОЦЕДУРАХ ОМОЛОЖЕНИЯ, ДЕТОКС, ЛИФТИНГА, НЕХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ОВАЛА ЛИЦА, ТЕРАПИИ СЕБОРЕИ И АКНЕ, РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ. ОСНАЩЕН КОМПЛЕКТОМ ЭЛЕКТРОДОВ МИКРОТОКОВЫМИ ПЕРЧАТКАМИ, МОДУЛЕМ ТЕПЛО-ХОЛОД. УДОБНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С ТАЙМЕРОМ 90 МИНУТ. СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН И ПРОСТОТА В ЭКСПЛУАТАЦИИ.



1301311

Размеры аппарата (ДхШхВ)
400x250x120 ±2 мм

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ
ГАЛЬВАНИКА
РАЗОГРЕВ 35-55° C
ОХЛАЖДЕНИЕ 5-20° C

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛИЦА: ЛИФТИНГ, ЛИМФОДРЕНАЖ, ДЕПИГМЕНТАЦИЯ, УВЛАЖНЕНИЕ, КОРРЕКЦИЯ САЛООТДЕЛЕНИЯ, ОМОЛОЖЕНИЕ

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБЛАСТИ ГЛАЗ: ЛИФТИНГ, КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН, ОТЕКОВ, "МЕШКОВ" И ТЕМНЫХ КРУГОВ ПОД ГЛАЗАМИ

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ТЕЛА: ЛИФТИНГ, ЛИМФОДРЕНАЖ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания 230V/50Hz

Форма выходного сигнала в режиме Galvanic:

Однополярные импульсы с частотой 100 Гц, длительность импульсов от 5 мкс до 40 мкс

Форма выходного сигнала в режиме BIO

Однополярные импульсы с частотой 100 Гц, от 5 мкс до 40 мкс, длительность пачек импульсов 0.5 сек, период 1 сек.

Температура нагрева "Тепло/Холод" 35-55° C

Форма выходного сигнала в режиме Galvanic + MODE (AC)

Биполярные импульсы с частотой 100 Гц, длительность импульсов от 5 мкс до 40 мкс

Форма выходного сигнала в режиме BIO + MODE (AC)

Биполярные импульсы с частотой 100 Гц, длительность от 5 мкс до 40 мкс, длительность пачек импульсов 0.5 сек, период 1 сек.

Максимальная амплитуда выходного напряжения 50 В

Максимальная амплитуда выходного тока в импульсе 30 Ма

Температура охлаждения манипулы "Тепло/Холод" 5-20° C

АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА

ГЕЛЬ С
ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ



4501413APROR – 630 мл
4501418AR – 250 мл

ГЕЛЬ С ИКРОЙ И
КОЛЛАГЕНОМ



4501425APROR – 630 мл
4501426AR – 250 мл

ГЕЛЬ
«УЛЬТРАЛИФТ»



4501411APROR – 630 мл
4501416AR – 250 мл

АКВА-ГЕЛЬ
АЛОЭ-ВЕРА



4501412APROR – 630 мл
4501417AR – 250 мл

ПРОВОДЯЩИЙ
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ



4501431PRO – 700 мл

ГЕЛЬ «БОДИ
ЛИФТ АКТИВ»



4501429APROR – 630 мл
4501430AR – 250 мл

СТАЦИОНАРНЫЙ АППАРАТ ДАРСОНВАЛЬ Biolift 4 103

для лица, тела и волос

СТАЦИОНАРНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ ЛИЦА, ТЕЛА И ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К МЕДОБОРУДОВАНИЮ,

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ ПОДТВЕРЖДЕНА ТЕХ.ИСПЫТАНИЯМИ.

ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ШИРОКОГО КРУГА КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ И ТЕРАПИИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.

УКОМПЛЕКТОВАН 5 ЭЛЕКТРОДАМИ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ



1303114M



5 СТЕКЛЯННЫХ ЭЛЕКТРОДОВ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ

- ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ.
- В КОРПУСЕ АППАРАТА РАСПОЛОЖЕНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЯЧЕЙКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ
- НА БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИБОРА УДОБНАЯ ПОДСТАВКА –ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МАНИПУЛЫ.
- ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ НА РАБОЧЕЙ ПАНЕЛИ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания 230V/50Hz

Частота следования пачек импульсов: 100±10 Гц

Форма выходного сигнала: синусоидальные быстрозатухающие импульсы

Длительность импульсов: 60 мкс

Частота высокочастотного заполнения: 110±10 кГц

Максимальная сила тока не более: 0,2 мА

АППАРАТ ДАРСОНВАЛЬ ВР-7000

для лица, тела и волос

ПОРТАТИВНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ ЛИЦА, ТЕЛА И ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ. ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ШИРОКОГО КРУГА КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ И ТЕРАПИИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.

ПРИБОР УКОМПЛЕКТОВАН 5 НАСАДКАМИ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ



1301290MP

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ВОЛОСИСТОЙ
ЧАСТИ ГОЛОВЫ

УДОБНАЯ, ЭРГОНОМИЧНАЯ ФОРМА
5 ЭЛЕКТРОДОВ САМОЙ ВОСТРЕБОВАННОЙ ФОРМЫ
РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ
ВОЗДЕЙСТВИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания 230V/50Hz

Частота следования пачек импульсов: 100±10 Гц

Форма выходного сигнала: синусоидальные
быстрозатухающие импульсы

Длительность импульсов: 50 мкс

Частота высокочастотного заполнения: 110±10 кГц

Максимальная сила тока не более: 0,2 мА

Выходное напряжение, не более: 60 кВ

АППАРАТ RF ЛИФТИНГА И ХРОМОТЕРАПИИ

OK 018 BIO SONIC

СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ ДВЕ ПОПУЛЯРНЫЕ И ВОСТРЕБОВАННЫЕ МЕТОДИКИ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ.

RF ЛИФТИНГ УКРЕПЛЯЕТ И РЕМОДЕЛИРУЕТ ДЕРМУ, ПОВЫШАЯ УПРУГОСТЬ КОЛЛАГЕНОВЫХ ВОЛОКОН И АКТИВИРУЯ НЕОКОЛЛАГЕНЕЗ, УМЕНЬШАЕТ ИЗЛИШКИ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ.

ХРОМОТЕРАПИЯ КРАСНЫМ ЦВЕТОМ УЛУЧШАЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ, РЕГУЛИРУЕТ МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И УСИЛИВАЕТ ДЕЙСТВИЕ RF ЛИФТИНГА.



1301048

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



RF ЛИФТИНГ
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЙ ПРОГРЕВ ГЛУБОКИХ СЛОЕВ КОЖИ ДО ТЕМПЕРАТУРЫ, СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ВЫРАБОТКУ КОЛЛАГЕНА



ХРОМОТЕРАПИЯ
СТИМУЛЯЦИЯ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА, НУФ И ОБРАЗОВАНИЯ НОВЫХ СОСУДОВ ТОНИЗАЦИЯ И УКРЕПЛЕНИЕ КОЖИ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания АС 220-230 В, 50 Гц

Габариты 260 x 110 x 270 мм

Выходная частота в режиме RF 2 МГц
Хромотерапия красный цвет 628-780 нм

Вес 1,1 кг

АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА

ГЕЛЬ «БОДИ ЛИФТ АКТИВ»



4501429APROR – 630 мл
4501430AR – 250 мл

ГЕЛЬ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ И RF КОРРЕКЦИИ



4501425APROR – 630 мл
4501426AR – 250 мл, 4515500K – 130 мл

КРЕМ ПОСЛЕ ЛАЗЕРНОЙ И RF КОРРЕКЦИИ




4515501K – 130 мл

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМБАЙН UK230 8003

с ультразвуком и микротоками

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН, КАЧЕСТВО И ОПТИМАЛЬНЫЙ НАБОР ФУНКЦИЙ ПОЗВОЛЯЕТ ОБОРУДОВАТЬ САЛОН КРАСОТЫ В СООТВЕТСТВИИ С СОВРЕМЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ КОСМЕТОЛОГИИ. НЕСКОЛЬКО НЕЗАВИСИМЫХ УСТРОЙСТВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПРИБОРА UK230 8003 GEZATONE, ОБЕСПЕЧАТ ВАС ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ РАБОТЫ.

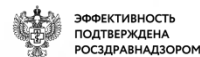

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

ВАПОРИЗАТОР: СО СТЕКЛЯННОЙ КОЛБОЙ, ТАЙМЕРОМ, ОЗОНОМ, РЕГУЛЯТОРОМ ИНТЕНСИВНОСТИ ПОДАЧИ ПАРА.

ДАРСОНВАЛЬ: 4 СТЕКЛЯННЫХ ЭЛЕКТРОДА (ПРЯМОЙ, ИЗОГНУТЫЙ, ГРИБОВИДНЫЙ, ЛЕПЕСТКОВЫЙ).

УЗ МОДУЛЬ: УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЧИСТКА, ФОНОФОРЕЗ, МИКРОМАССАЖ.

ГАЛЬВАНИКА: 3 ЭЛЕКТРОДА (РОЛИКОВЫЙ, ШАРИКОВЫЙ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ). РЕГУЛЯТОР ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПОЛЯРНОСТИ.

МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ: ПРОЦЕДУРЫ ЛИФТИНГА И ЛИМФОДРЕНАЖА, ПРОВОДИМЫЕ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОДОВ-ПЕРЧАТОК.

ВАКУУМ И СПРЕЙ: 3 СТЕКЛЯННЫЕ НАСАДКИ (ПРЯМАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ, ИЗОГНУТАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ, ЩЕЛЕВИДНАЯ).

ВАКУУМ-СПРЕЙ: 2 ФЛАКОНА СПРЕЯ.

ЛАМПА ЛУПА С КРЫШКОЙ: УВЕЛИЧЕНИЕ В 3 РАЗА.

УФ - СТЕРИЛИЗАТОР



1303117M

АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА

ЛОСЬОН
ДЕЗИНКРУСТАНТ



4501415APROR – 630 мл
4501420AR – 250 мл

ГЕЛЬ «УЛЬТРАКЛИН
КОНТРОЛЬ»



4501421APROR – 630 мл
4501422AR – 250 мл

ГЕЛЬ «УЛЬТРАКЛИН
СЕНС»



4501423APROR – 630 мл
4501424AR – 250 мл

ГЕЛЬ
«УЛЬТРАЛИФТ»



4501411APROR – 630 мл
4501416AR – 250 мл

АКВА-ГЕЛЬ
АЛОЭ-ВЕРА



4501412APROR – 630 мл
4501417AR – 250 мл

ЛИФТИНГОВЫЙ
ГИДРАТИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ



4501432PRO – 700 мл

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры модуля дарсонваля

частота следования пачек импульсов - 50±10 Гц
длительность импульсов - 50 мкс частота
высокочастотного заполнения - 200±10 кГц
максимальная сила тока не более - 0,2 мА

Параметры модуля микротоков

Выходной ток модуля микротоков максимальный ток
в импульсе не более - 20 мА
Форма выходного сигнала модуля микротоков
пачки дипольных импульсов с интервалом от 2 до 15 мс
Выходное напряжение модуля микротоков, не более - 60В,
на нагрузке 1кОм не более - 20В

Параметры модуля гальваники

выходное напряжение модуля гальваники - 27В
диапазон токов -10 - 330 мкА

Параметры модуля ультразвука

Частоты ультразвука 23 - 28 кГц, 1 МГц
Интенсивность ультразвука - 9 фиксированных
уровней:
не более 2 Вт/см²

Параметры вакуумного модуля

Сила вакуума, не менее 0,6 кгс/см²
Суммарная потребляемая мощность-710 Вт.
Габариты в упаковке - 1,15x0,6x0,44 м.

МИОСТИМУЛЯТОР ДЛЯ ТЕЛА BIOLIFT 677

с функцией ИК прогрева

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МИОСТИМУЛЯТОР ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТОНУСА МЫШЦ И КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ. В АППАРАТЕ 4 ПРОГРАММЫ, УСТАНОВКА И УПРАВЛЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ ЖК-ДИСПЛЕЯ. ПОМИМО ПАРНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ, МИОСТИМУЛЯТОР **ОСНАЩЕН** СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОДОМ-КОВРИКОМ ДЛЯ ПРОЦЕДУР НА БОЛЬШИХ УЧАСТКАХ ТЕЛА. ВОЗМОЖНОСТЬ НЕЗАВИСИМОЙ РЕГУЛИРОВКИ КАЖДОГО КАНАЛА.

ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ: ЖИВОТ, СПИНА, БЕДРА, ГОЛЕНИ, ЯГОДИЦЫ, ГРУДЬ, РУКИ, ПЛЕЧИ, ШЕЯ.



1301322

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



ЭМС

5 ПАР ЭЛЕКТРОДОВ С ФУНКЦИЕЙ ИК ПРОГРЕВА
1 ЭЛЕКТРОД – КОВРИК ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БОЛЬШИЕ УЧАСТКИ
РЕМНИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ



ИК ПРОГРЕВ: РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ДО 60 ГРАДУСОВ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОЛНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение АС 110V/220V/230V/240V
Частота 50-60Hz, Мощность 350W
Масса 6,5 кг
Размеры 46x37x19 см
10 электродов ЭМС ИК+ 10 ремней + 5 проводов
1 большой электрод ЭМС ИК + 3 ремня фиксации

4 ПРОГРАММЫ

1. Для укрепления мышц, повышения тонуса и тургора кожи.
2. Программа тонизации, повышения эластичности мышц и наращивания мышечной массы.
3. Программа уменьшения объемов, коррекции избыточных жировых отложений и целлюлита.
4. Программа для детоксикации и выведения жидкости, при отечности, целлюлите.

АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА

ГЕЛЬ «БОДИ ЛИФТ
АКТИВ»



4501429APROR – 630 мл
4501430AR – 250 мл

ГЕЛЬ
С ИКРОЙ И КОЛЛАГЕНОМ



4501425APROR – 630 мл
4501426AR – 250 мл

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ ГЕЛЬ
"ЦЕЛЛЮГЕЛЬ"



4501818K – 200 мл

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АППАРАТ BIO SONIC 1400

RF ЛИФТИНГ, КАВИТАЦИЯ, МИКРОТОКИ, ВАКУУМ

Для лица и тела

СОЧЕТАЕТ 4 МЕТОДИКИ
Позволяет проводить антицеллюлитные,
лифтинговые и омолаживающие
процедуры, решать проблемы, связанные
с лишним весом и жировыми
отложениями.

Оснащен 5 манипулами

ТАЙМЕР время процедуры до 60 минут
Аппарат обладает возможностью
регуляции интенсивности воздействия.
Управление и установка параметров
осуществляется при помощи LCD-дисплея.
В RF манипулах дополнительная функция
хромотерапии красного спектра.



1301310



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



RF ЛИФТИНГ

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЙ
ПРОГРЕВ ГЛУБОКИХ
СЛОЕВ КОЖИ ДО
ТЕМПЕРАТУРЫ,
СТИМУЛИРУЮЩЕЙ
ВЫРАБОТКУ
КОЛЛАГЕНА

КАВИТАЦИЯ

БЕЗОПАСНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
ЖИРОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ
И РАСЩЕПЛЕНИЕ ЖИРА
УЗ ВОЛНОЙ С ЦЕЛЬЮ
УМЕНЬШЕНИЯ ОБЪЕМА
В ПРОБЛЕМНЫХ ЗОНАХ

МИКРОТОКИ

ФУНКЦИЯ МТТ
ПРИСУТСТВУЕТ В 3
МАНИПУЛАХ, ГДЕ
КОМБИНИРУЕТСЯ С RF
ЛИФТИНГОМ И
КРАСНОЙ
ХРОМОТЕРАПИЕЙ.

ВАКУУМ

ВАКУУМНАЯ НАСАДКА С
RF ЭЛЕКТРОДАМИ ДЛЯ
РАБОТЫ ПО ТЕЛУ, ДЛЯ
ПОДТЯЖКИ КОЖИ.
УСКОРЯЕТ ВЫВЕДЕНИЕ
ПРОДУКТОВ РАСПАДА
ЖИРА ПОСЛЕ КАВИТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота ультразвука: 40 КГц

Частота RF: 5 МГц

Параметры микротоков: 0-3 мА, 0-33 В

Уровни интенсивности: 6

Входное напряжение: 220-240 В / 50-60 Гц

Таймер: максимально 60 минут

Вес: 8 Кг

Размер упаковки: 460x380x390мм

АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА

ГЕЛЬ «БОДИ ЛИФТ АКТИВ»



4501429APROR – 630 мл
4501430AR – 250 мл

ГЕЛЬ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ И RF КОРРЕКЦИИ



4501425APROR – 630 мл
4501426AR – 250 мл, 4515500K – 130 мл

КРЕМ ПОСЛЕ ЛАЗЕРНОЙ И RF КОРРЕКЦИИ



4515501K – 130 мл

АППАРАТ ДЛЯ ПРЕССОТЕРАПИИ MD-3a 2052

с функцией прогрева и EMS

СОЧЕТАНИЕ ФУНКЦИИ ПРЕССОМАССАЖА, ИНФРАКРАСНОГО ПРОГРЕВА И МИОСТИМУЛЯЦИИ ПОЗВОЛЯЕТ СОСТАВЛЯТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ. ПРЕССОТЕРАПИЮ И ИК ПРОГРЕВ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОВМЕСТНО И ПО ОТДЕЛЬНОСТИ НА ЛЮБОЙ ЧАСТИ ТЕЛА.



1301255

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



ПРЕССОТЕРАПИЯ:
4 РЕЖИМА,
10 ЗОН
7 ПНЕВМОПОДУШЕК



ЭМС
5 ПАР ЭЛЕКТРОДОВ,
РЕМНИ ДЛЯ
КРЕПЛЕНИЯ



ИК ПРОГРЕВ: ВЫБОР
ТЕМПЕРАТУРНОГО
РЕЖИМА
ДЛЯ КАЖДОЙ ЗОНЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания АС 220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: не более 350 Вт
Костюм: 10 зон, 7 пневмоподушек
Максимальный обхват элемента талии 116 см
Максимальный обхват элементов бедер 86 см
Максимальный обхват элементов рук 60 см

Давление в режиме прессомассажа: до 0,2 МПа
Диапазон температур (функция прогрева): 35-65° С
В режиме ЭМС
Выходное напряжение: не более 150 В
Выходной ток в импульсе: не более 70 Ма
Длительность импульсов: не более 250 мкс
Частота выходных импульсов: 125 Гц

АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА

ГЕЛЬ «БОДИ ЛИФТ
АКТИВ»



4501429APROR – 630 мл
4501430AR – 250 мл

ГЕЛЬ
С ИКРОЙ И КОЛЛАГЕНОМ



4501425APROR – 630 мл
4501426AR – 250 мл

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ ГЕЛЬ
"ЦЕЛЛЮГЕЛЬ"



4501818K – 200 мл



МОСКВА 7 (495) 565-38-74,
РЕГИОНЫ 8 (800) 775-82-76 (звонок бесплатный)

www.smartbuy.ru

